

БІЛІРУБІН ПРЯМИЙ/ЗАГАЛЬНИЙ, МЕТОД ЕНДРАШИКА-ГРОФА

Bilirubin Direct/Total, Jendr. Grof

Кат. №: 116320

Дата випуску інструкції: 04-03-2016
Версія 09а



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

Кат. №	Вміст		
103200	4 x 100 мл (416 мл)	2 x 100 мл	Реагент 1 BD
		2 x 100 мл	Реагент 1 BT
		2 x 8 мл	Реагент 2
103210	4 x 50мл (208 мл)	2 x 50 мл	Реагент 1 BD
		2 x 50 мл	Реагент 1 BT
		4 x 50 мл	Реагент 2
116320	4 x 25 мл (104 мл)	2 x 25 мл	Реагент 1 BD
		2 x 25 мл	Реагент 1 BT
		2 x 2 мл	Реагент 2

Додатково постачаються:

D98485SV	1 x 3 мл	Калібратор	Diacal Auto
D98485	5 x 3 мл	Калібратор	Diacal Auto
D98481	12 x 5 мл	Контроль норма	Diascon N
D98482	12 x 5 мл	Контроль патологія	Diascon P

ПАРАМЕТРИ АНАЛІЗУ

Метод: колориметричний, зростаючої реакції, кінцевої точки, Ендрасика-Грофа,
555 нм

Довжина хвилі: 555 нм

Температура: 20-25 °С або 37 °С

Зразок: Сироватка або плазма

Лінійність: до 20 мг/дл Загального Білірубину

СКЛАД РЕАГЕНТІВ КОМПОНЕНТИ

РЕАГЕНТ	КІНЦЕВА КОНЦЕНТРАЦІЯ
Реагент 1, Білірубін Прямий:	
Сульфанілова кислота	32.2 ммоль/л
Реагент 1, Білірубін Загальний:	32.2 ммоль/л
Сульфанілова кислота	
Етиленгліколь	
Диметилсульфоксид (ДМСО)	
Реагент 2:	109 ммоль/л
Нітрит натрію	

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

Субстрат Старт:

Готові до використання реагенти.

Зразок Старт (Робочий реагент):

Змішати 150 частин реагенту 1 з 1 частиною реагенту 2.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТІВ

Умови: захищати від світла, негайно закрити після використання.
при 2 – 8 °С

Зберігання: до закінчення терміну придатності

Стабільність:

Робочий реагент:

Стабільність: при 20-25 °С 8 годин*

*в бурштинових пляшечках

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ

Дуже важливо зберігати зразок захищеним від світла!
Використовувати тільки чисту, не гемолізовану сироватку.

Стабільність:	при 15 – 25 °С	2 години
	при 2 – 8 °С	5 годин
	при – 20 °С*	2 місяці

*в разі негайного заморожування після роботи!
Видаляти забруднені зразки.

ІНТЕРФЕРУЮЧІ РЕЧОВИНИ

Немає інтерференції при концентраціях до:
Гемоглобін 1000 мг/дл

РУЧНА ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

Довести реагенти та зразки до кімнатної температури.

Зразок Старт:

Внести в пробірки	Бланк зразка	Зразок	Бланк калібратора	Калібратор
Реагент 1	1000 мкл	-	1000 мкл	-
Робочий реагент	-	1000 мкл	-	1000 мкл
Зразок	100 мкл	100 мкл	-	-
Калібратор	-	-	100 мкл	100 мкл

Змішати без затримки. Інкубувати 3 хв. при 30 °С або 2 хв. при 37 °С.
Зчитати абсорбцію кожного аналізу щодо відповідного бланка.

Субстрат Старт:

Внести в пробірки	Бланк зразка	Зразок	Бланк калібратора	Калібратор
Реагент 1	1000 мкл	1000 мкл	1000 мкл	1000 мкл
Зразок	100 мкл	100 мкл	-	-
Калібратор	-	-	100 мкл	100 мкл
Реагент 2	-	10 мкл	-	10 мкл

Змішати без затримки. Інкубувати 3 хв. при 30 °С або 2 хв. при 37 °С.
Зчитати абсорбцію кожного аналізу щодо відповідного бланка.

РОЗРАХУНОК (світлова доріжка 1 см)

3 калібратором:

$$\text{Білірубін [мг/дл]} = \frac{\Delta A \text{ зразка}}{\Delta A \text{ Калібратора}} \times \text{конц. кал. [мг/дл]}$$

3 фактором:

$$\text{Білірубін [мг/дл]} = \Delta A \text{ Зразка} \times \text{фактор}$$

$$\text{Фактор} = 12.9$$

Фактор необхідно перевіряти калібруванням сироватки і адаптувати при необхідності!

ПЕРЕТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ

$$\text{мг/дл} \times 17.1 = \text{мкмоль/л}$$

РЕФЕРЕНТНИЙ ДІАПАЗОН* (мг/дл)

Кон'югований (прямий) білірубін:	0,0 - 0,2
Некон'югований білірубін:	0,2 - 0,8
Загальний білірубін:	0,2 - 1,0

*Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала свій власний референтний діапазон.

ПРИНЦИП АНАЛІЗУ

Білірубін формується з гема частки гемоглобіну, що вивільняється зрілими або пошкодженими червоними кров'яними клітинами. Потім він в печінці перетворюється в моноглюкуронід білірубину і диглюкуронід білірубину.

Вільний білірубін не розчиняється у водному розчині і вимагає розчинення алкоголем або іншими розчинниками для реагування.

Реакції, що проводяться в цих розчинниках, забезпечують вимірювання загального білірубину.

Моно і диглюкуроніди білірубину розчинні у воді і вимірювання, що проводяться у водному розчині, надають те, що в такому вигляді називається прямим білірубіном.

У наших реагентах ми використовуємо диметилсульфоксид (ДМСО) і етиленгліколь в якості розчинників для аналізу загального білірубину. Білірубін у цих розчинниках легко реагує з діазотирований сульфаніловою кислотою для отримання інтенсивно забарвленого діазо-барвника. Інтенсивність забарвлення цього барвника в розчині пропорційна концентрації прямого або загального білірубину, відповідно.

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛІНІЙНІСТЬ

Цей аналіз є лінійним до 20 мг/дл. Коли концентрації білірубину перевищують 20 мг/дл, зразок повинен бути розведений дистильованою або деіонізованою водою, а аналіз повторений; результат помножити на коефіцієнт розведення.

ТОЧНІСТЬ (при 37 °С), Білірубін Загальний, n=10

В аналізі	Середнє (мг/дл)	СВ (мг/дл)	КВ (%)
Зразок 1	5,59	0,006	0,116
Зразок 2	0,385	0,015	3,97
Між аналізами	Середнє (мг/дл)	СВ (мг/дл)	КВ (%)
Зразок 1	5,14	0,096	1,87
Зразок 2	0,57	0,032	5,6



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

ТОЧНІСТЬ (при 37 °С), Білірубін Прямий, n=10

В аналізі	Середнє (мг/дл)	СВ (мг/дл)	КВ (%)
Зразок 1	5,44	0,004	0,078
Зразок 2	0,306	0,011	3,75

ПОРЯВНЯННЯ МЕТОДІВ

Порівняння даного набору Білірубину Прямого (у) з наявним на ринку набором для аналізу (х) з використанням 39 зразків дало наступні результати: $y = 0,989x + 0,001$ мг/дл; $r = 0,998$.

Порівняння даного набору Білірубину Загального (у) з наявним на ринку набором для аналізу (х) з використанням 41 зразка дало наступні результати: $y = 0,991x + 0,005$ мг/дл; $r = 0,998$.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Можуть бути використані всі контрольні сироватки зі значеннями білірубину, що визначаються даним методом. Рекомендується:

Кат. №	Вміст	Diacon	Примітки
D98481	12 x 5 мл	Diacon N	Перевірена контрольна сироватка норма
D98482	12 x 5 мл	Diacon P	Перевірена контрольна сироватка патологія

КАЛІБРУВАННЯ

Аналіз вимагає використання стандарту білірубину або калібратора. Рекомендується:

Кат. №	Вміст	DIACAL	Примітки
D98485SV	1 x 3 мл	DIACAL AUTO	Перевірена мультикалібрувальна сироватка
D98485	5 x 3 мл	DIACAL AUTO	Перевірена мультикалібрувальна сироватка

АВТОМАТИЗАЦІЯ


При необхідності для автоматизованих аналізаторів можуть бути проведені спеціальні адаптації.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Реагент 1: Небезпечний
 H314: Спричиняє серйозні опіки шкіри та пошкодження очей.
 P260: Не вдихати пил/дим/газ/туман/пари/аерозолі.
 P280: Носити захисні рукавички/захисний одяг/засоби захисту очей/обличчя.
 P303+P361+P353: ПРИ ПОПАДАННІ НА ШКІРУ (або волосся): негайно зняти увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою/під душем.
 P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: обережно промити водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо можливо. Продовжити промивання.
 EUN208: Містить сульфанілову кислоту. Може викликати алергічну реакцію.
- Вжити необхідних заходів обережності при використанні лабораторних реагентів.

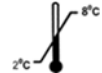

ВИРОБНИК

Діалаб GmbH

Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджект М55, 2351

Вінер-Нойддорф

Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at